

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Наименование	Стерилизатор зубных щеток Aquarick		
Дата покупки	Год	Месяц	Дата
Гарантийный период	1 Год с даты покупки		
Поставщик	Наименование:		
	Адрес:		
	Контактное лицо:		
	Тел.:		
Покупатель	Адрес:		
	Имя:	Тел.:	

- Данный продукт прошел строгий контроль качества, а также технические испытания медицинских изделий. Если произошла поломка, пожалуйста, заполните гарантийную карту и обратитесь к авторизованному представителю.
- Пожалуйста, не выбрасывайте гарантийную карту, так как замена и ремонт возможны только при наличии гарантийной карты.
- После покупки запишите дату в Гарантийную карту.

Страна происхождения: Корея / Сделано в Корее

Производитель: Aquarick Co., Ltd
SK V1 Center, 171, Gasan digital 1-ro, Geumcheon –gu,
Сеул, Южная Корея

Сервисный центр: +7(8652)525-888 / E-mail. info@aquarick.ru

aquarick

Стерилизатор зубных щеток
Aquarick

Руководство пользователя



Стерилизация, Сушка

На основе данных
тестирования
уничтожает бактерии:


- Кишечной палочки до 92.7%
- Золотистого стафилококка до 90.9%

- Имеет светодиодный индикатор вкл/выкл
- Эстетичный и простой дизайн, который подойдет к вашему интерьеру
- Съёмный держатель щеток и пасты

Меры предосторожности

1. Перед использованием объясните детям меры предосторожности по работе с данным устройством.
2. Не дотрагивайтесь руками до нагревательной пластины (стерилизационной панели) внутри устройства.
3. Не допускайте попадание воды внутрь устройства.
4. Во избежание риска поражения электрическим током не устанавливайте данное устройство в таком месте, где вода может попасть внутрь устройства.
5. Если во время использования проявилась неисправность устройства, не пытайтесь разобрать самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
6. Если поврежден кабель питания, не пытайтесь разобрать самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Комплектация

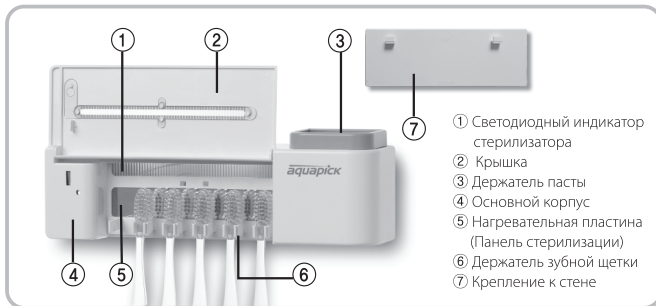

Как использовать

1. Допустимое напряжение 220 В.
2. При помощи крепления зафиксируйте основной корпус на стене и включите вилку в розтку.
3. Если вы используете розетку с выключателем, то питание будет автоматически подаваться на устройство, и запустится процесс стерилизации.
4. После использования зубной щетки, стряхните воду, чтобы просушить ее, откройте крышку и поместите зубную щетку в соответствующий держатель.
5. После того, как поместили зубную щетку в держатель и закрыли крышку, загорится светодиод и автоматически запустится процесс стерилизации.
6. Вилка всегда должна быть вставлена в розетку. Сушка будет запускаться автоматически.

Как ухаживать

1. Спустя пять минут после того, как выключили из розетки, откройте крышку и очистите стерилизатор изнутри.
2. Держатель щетки и пасты можно легко снять и очистить. После очистки, их можно использовать снова.
3. После очистки протрите стерилизатор насухо хлопчатобумажной тканью.

Как установить крепление на стене

1. Выберите место, куда планируете прикрепить держатель.
2. Протрите выбранное место сухой тканью.
3. Снимите защитную ленту с двухстороннего скотча панели и плотно прижмите панель к стене в течение 3 минут.
4. Рекомендуем зафиксировать устройство на панели через 1-2 часа.
5. Настенная панель может упасть из-за влажности в ванной, поэтому будет надежнее приклеить панель при помощи силикона или зафиксировать ее шурупами.

Что нужно проверить, если есть отказ в работе

1. Проверьте, горит ли индикатор.
2. Проверьте, плотно ли закрыта крышка стерилизатора.
3. Если индикатор не горит, проверьте, подключен ли кабель к розетке.

Технические характеристики

Наименование	Стерилизатор зубных щеток Aquarick
Питание	220 В переменного тока / 60 Гц
Мощность	5 Вт
Материал изготовления	пластик АБС
Размеры	240(длина) x 62(ширина) x 76(высота) мм
Длина кабеля	1,3 м
Вес	270 г